

NEO CHAIR M5

Become the new standard for Unit Chair

◇ ◇ ◇ NEO CHAIR M5 런칭 안내



01

NEO CHAIR M5 소개

- M5 설명
- M5 특징점
- M5 판매정책

02

경쟁사 비교

- 경쟁사 체어 설명
- 경쟁사 판매정책

03

사전 판매 프로모션

- M5 사전 판매 리플릿
- M5 사전 판매정책 안내

04

M3 대비 개선점

- 개선사항 (종합)
- 개선사항 (세부)

05

엔지니어 인터뷰

01


NEO CHAIR M5 소개

- M5 설명
- M5 특징점
- M5 판매정책

Cart Type
(M5-C)



Mount Type
(M5-M)

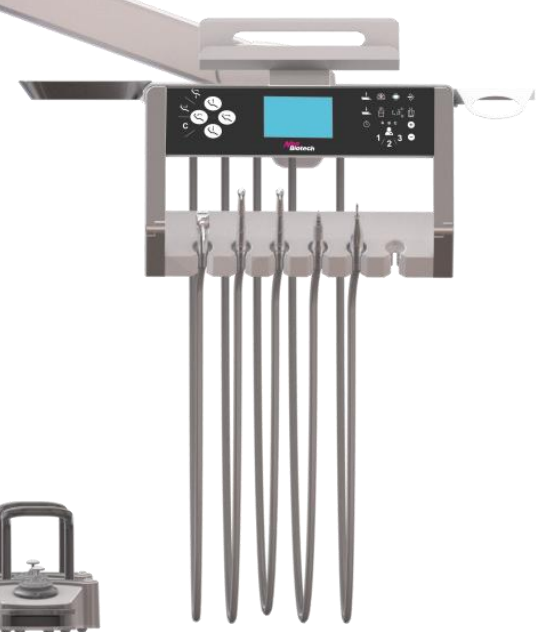



[Technology]

회전 가능한 사이드박스

최우 90° 회전이 가능하여 환자 양방향에서
사용자가 포지션 잡기 용이



9개 진료 Position

최대 9개의 진료포지션 설정으로
빠르고 다양한 진료가 가능

★keypoint

직관적인 인터페이스

강화유리 패널, 정전식 터치 적용으로
관리가 쉽고 내구성이 우수함

★keypoint

전동식 높이조절

사용자의 맞춰 편리하게 높낮이 조절이 가능하고,
무거운 하중에도 안정적임



★keypoint

온수 공급 기능

급수구를 기본으로 덕터테이블에도 타사 대비 2배 용량의
온수를 공급하여 치료 시 환자의 치아 시린 증상을 완화



인스트루먼트 거치대

치료 기구의 간섭을 최소화하여
사용자의 안전한 진료가 가능

[Comfort]

시트 틸팅 가능

백레스트 하강 시 환자의 진료위치를
안정적으로 유지하여 편안한 포지션을 제공



저소음의 부드러운 동작

소음이 적고 유지보수가 편리하며,
제어의 부드러운 움직임은 환자에게 인력함을 제공



☆keypoint

최고급 가죽 원단

부드러운 두께감으로 환자에게 편안함을 제공하고,
우수한 내마모성으로 관리가 편리함



☆keypoint

닥터 스톨

인체공학적 디자인으로 6단계 조절이 가능하고
장시간 진료에도 사용자의 피로감을 최소화



Clean up Position

가장 높은 직립 상태의 포지션 제공을 통해
보다 편안한 제어 환경을 제공



[Safety]

안전 감지 센서

장애물 감지 시, 체어 작동을 멈추고
포지션을 상승시켜 안전사고를 예방



회전 가능한 타구대

최우 180° 회전되어 가글 시 접근이 용이하고,
쉽게 탈부착 되어 관리가 편리함



세척 가능한 석션 필터

석션 필터 교체 및 세척을 통해
석션 호스 위생 관리가 용이함



수관 세척 시스템

자동 ASTER 수관 세척 시스템 탑재를 통해
내부 감염 없이 효과적인 수관 세척 가능



[Standard]



모니터 암



닥터 스톨



수관세척 시스템



인스트루먼트 운수 시스템

[Option]



보조 스톨



헬퍼 시스템



모니터 27" / 43" (가치대 포함)



확장 테이블

Instrument

HighSpeed Handpiece



RED60-26 (AppleDental)
Power : 22W / KaVo Type



RED-TUQP (AppleDental)
Power : 17W / NSK Type



E680L (KaVo)
Power : 18W



M900L (NSK)
Power : 26W

Coupling



RED60-26 QC
460 LED Coupling과 호환 가능



RED-TUQP QC
QD Type Coupling과 호환 가능



460 LED



PTL-CL LED

LowSpeed Handpiece



LN-M4 (AppleDental)
내부 주수





FX 205 Set (NSK)
외부 주수

Scaler



Compact S (Demetec)

• Dimensions

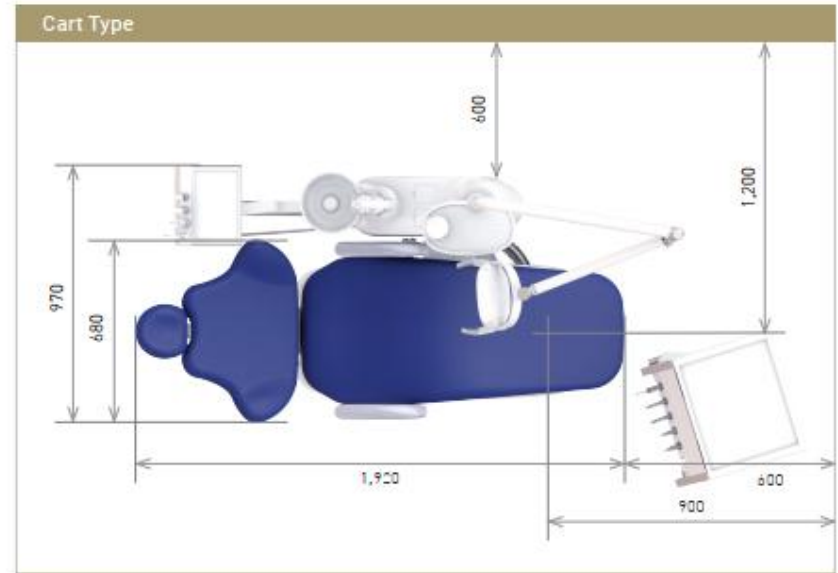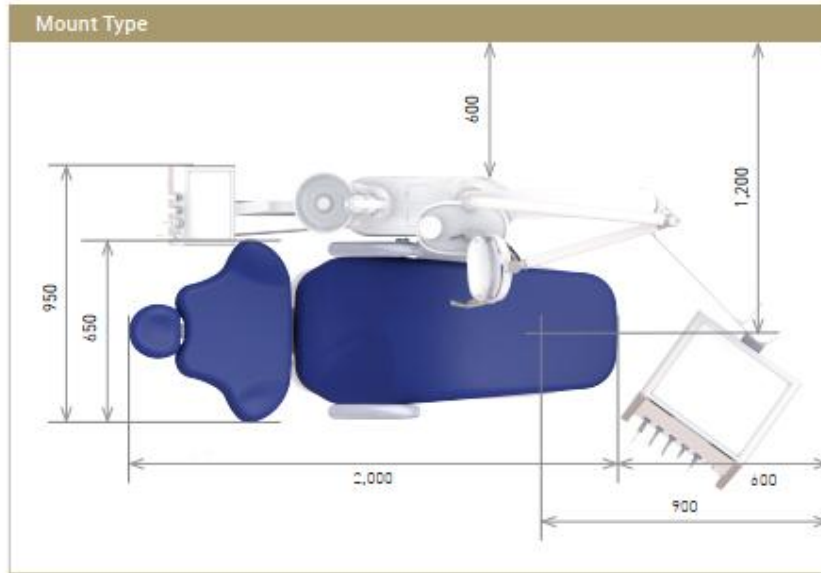

• Color



Option color는 계약 시,
 > 설치 일정 별도 협의 필수!!
 건 별 주문 품목이므로 최소 한달 소요

특장점

닥터 테이블


Cart
높낮이 조절

온수 공급



직관적인 인터페이스

- 강화유리 패널과 정전식 터치를 적용하여 관리가 쉽고 내구성이 우수함

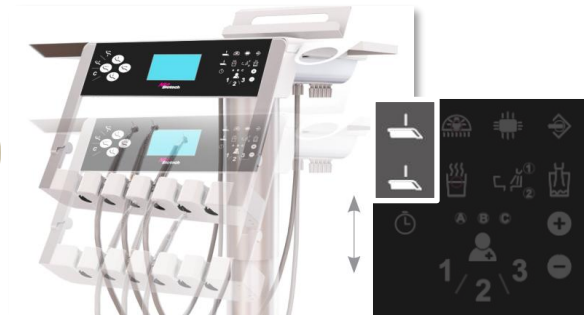

전동식 높이 조절

- 업계 유일 전동식으로 사용자의 맞춰 편리하게 높낮이 조절이 가능
- 닥터 테이블에 높낮이 조절 아이콘 있음



인스트루먼트 온수 공급

- 급수구를 기본으로 닥터테이블에도 온수 워머가 있어 타사 대비 2배의 용량의 온수를 공급하여 환자의 치아 시린 증상 완화

<단위 : 천원>

| 구분 | 체어 대수 | 판매가 |
|------|-------|-------|
| M5-M | 1~2대 | 5,000 |
| | 3대 이상 | 4,800 |

- M5-M 기준 (정가 550만원)
- **M5-C**는 해당 PKG에서 **+30만원**
- 사전 판매기간 중에는 **-30만원**
- 핸드피스 및 스케일러 필요 시 별도 가격 추가 (뒷장 참고)

제품 조건

M5_M 알체어

계산서 발행 기준
(체어 최대 시)

<단위 : 수량 (개) / 금액(만원)>

| 구분 | PKG CODE | 계약금액 | 제공 할증 | 제공금액 |
|--------------|------------|--------|-------|--------|
| IS-III 조건 | IPM5M-5 | 500 | 250% | 1,750 |
| | IPM5M-10 | 1,000 | 320% | 4,200 |
| | IPM5M-20 | 2,000 | 340% | 8,800 |
| | IPM5M-30 | 3,000 | 370% | 14,100 |
| | IPM5M-50 | 5,000 | 420% | 26,000 |
| | IPM5M-100 | 10,000 | 470% | 57,000 |
| IS-II 조건 | IPLM5M-5 | 500 | 230% | 1,650 |
| | IPLM5M-10 | 1,000 | 300% | 4,000 |
| | IPLM5M-20 | 2,000 | 320% | 8,400 |
| | IPLM5M-30 | 3,000 | 350% | 13,500 |
| | IPLM5M-50 | 5,000 | 400% | 25,000 |
| | IPLM5M-100 | 10,000 | 450% | 55,000 |

| 판매 금액 | 가능수량 | 총계약금액 |
|-------|------|--------|
| 310 | 1 | 810 |
| 310 | 1 | 1,310 |
| 310 | 2 | 2,620 |
| 310 | 3 | 3,930 |
| 310 | 5 | 6,550 |
| 310 | 10 | 13,100 |
| 310 | 1 | 810 |
| 310 | 1 | 1,310 |
| 310 | 2 | 2,620 |
| 310 | 3 | 3,930 |
| 310 | 5 | 6,550 |
| 310 | 10 | 13,100 |

| 제품 | | | 체어 금액 (대당 450만원) |
|-------|-------|--------|---------------------|
| 금액 | 조정할증율 | 제공금액 | |
| 360 | 386% | 1,750 | 450 |
| 860 | 388% | 4,200 | 450 |
| 1,720 | 412% | 8,800 | 900 |
| 2,580 | 447% | 14,100 | 1,350 |
| 4,300 | 505% | 26,000 | 2,250 |
| 8,600 | 563% | 57,000 | 4,500 |
| 360 | 358% | 1,650 | 450 |
| 860 | 365% | 4,000 | 450 |
| 1,720 | 388% | 8,400 | 900 |
| 2,580 | 423% | 13,500 | 1,350 |
| 4,300 | 481% | 25,000 | 2,250 |
| 8,600 | 540% | 55,000 | 4,500 |

* 체어 PKG 동시 구매 시 구성품 단가

| 구분 | 제조사 | 제품명 | 정가 | 판매가 | 이미지 |
|------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 모니터 | - | 43인치 모니터 + 거치대 | - | 300,000 | |
| | | 27인치 모니터 | - | 150,000 | |
| High Speed | KAVO | E680L | 1,110,000 | 650,000 | 커플링 포함 (460LED) |
| | NSK | M900L | 890,000 | 500,000 | 커플링 포함 (PTL CL LED) |
| | AppleDental | RED60-26 (Kavo Type) | 400,000 | 200,000 | 커플링 포함 (460LED 호환) |
| | AppleDental | TUQP (NSK QD Type) | 300,000 | 125,000 | 커플링 포함 (QD) |
| Low Speed | NSK | FX 205 Set | 890,000 | 500,000 | |
| | AppleDental | LN-M4 | 4,000,000 | 200,000 | |
| 스케일러 | 디메텍 | Compact S | 250,000 | 200,000 | |
| 컴프레서 | 디보바인 | DBCOM_2.0 | 2,530,000 | 1,500,000 | 2마력 (체어 4대 내외) |
| | 디보바인 | DBCOM_3.0 | 2,970,000 | 2,000,000 | 3마력 (체어 6대 내외) |
| 석션 | 디보바인 | DBVAC | 1,210,000 | 1,000,000 | 체어 3대 내외 |

* 체어 옵션품 단가

| 구분 | 제품명 | 판매가 | 이미지 |
|-------|---------|---------|---|
| 체어 옵션 | 목&허리 쿠션 | 100,000 |  |
| | 석션 홀더 | 100,000 |  |
| | 닥터 스툴 | 250,000 |  |
| | 어시 스툴 | 200,000 |  |
| | 확장 테이블 | 100,000 |  |
| | 써지컬 테이블 | 250,000 |  |

02

경쟁사 비교

- 경쟁사 체어 설명
- 경쟁사 판매정책

O 사 K3

Over Arm
or
Cart

유압식



체어
이미지

M 사 N2

Over Arm
or
Cart

유압식



Under Arm
or
Cart

전동식



Under Arm

유압식



O 사 K5

D 사 luvis

구동 방식에 따른 분류

유압

- 속도 조절이 가능함
- 부품 수량이 많음
- 하중에 따라 속도 변화 있음



O사 K3
D사 Bright Alone
M사 N2
D사 Luvis

전동

- 부품 수량이 적어, AS 발생률이 낮음
- 움직임이 부드러움
- 속도 조절이 불가능함



NEO M5
O사 K5
S사 G2

Under Arm

- 진료 위치에 따라 위치 조절 간편
- Table 안정성 높음



O사 K5
D사 Luvis
D사 Bright Alone

Over Arm

- 시술자 진료에 편함
- Table 안정성 낮음



NEO M5
O사 K3
M사 N2
S사 G2

Cart

- 공간 활용 높음
- Table 안정성 높음



NEO M5
O사 K3, K5
M사 N2
D사 Bright Alone
S사 G2

Balance Arm에 따른 분류

< 단위 : 만원 >

| 구분 | | 네오 | 오스텀 | | 메가젠 | 덴티스 | 포인트닉스 |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 기본 조건 | 제품명 | M5 | K3 | K5 | N2 | LUVIS C | SK- I α |
| | High H/P | NSK | KaVo | KaVo | NSK | NSK | NSK |
| | Low H/P | NSK | NSK | NSK | NSK | NSK | NSK |
| | 단품 판매가 | 640 | 681 | 807 | 680 | 690 | 650 |
| 복합 PKG 1 (제품 5백만원) | 할증 | 250% | 115% | 115% | 270% | 280% | 280% |
| | 체어가 | 450 | 571 | 721 | 500 | 600 | 420 |
| | 총 금액 | 950 | 1,071 | 1,221 | 1,000 | 1,100 | 920 |
| 복합 PKG 2 (제품 1천만원) | 할증 | 320% | 120% | 120% | 270% | 300% | 280% |
| | 체어가 | 450 | 461 | 517 | 500 | 500 | 420 |
| | 총 금액 | 1,450 | 1,461 | 1,517 | 1,500 | 1,500 | 1,420 |

03

사전 판매 프로모션

- M5 사전 판매 리플릿
- M5 사전 판매정책 안내

M5

NEO CHAIR

Become the new standard for Unit Chair

Neo Biotech

Keypoint

최고급 가죽 원단

6단계 조절 닥터 소울

2배 용량의 온수공급

전동식 높이조절

NEO CHAIR M5

Launching Promotion

*사전 구매 기간
2023년 12월 1일 ~ 2024년 1월 14일

NEO CHAIR M5 런칭 기념 사전 구매 시 스페셜 혜택을 드립니다

Special Promotion 1

임플란트 동시 구매 시
~~3,100,000원~~ **280만원**

체어 단독 구매 시
~~5,000,000원~~ **470만원**

*Mount Type 기본이체, Cart Type은 30만원 추가

Special Promotion 2

런칭기념 사전 구매 고객 모두에게

기본제공 1 **Warranty 2년 → 5년 연장!!**

기본제공 2 **Chair 쿠션 Set 증정!!**

Option 선택 시 추가 제공 (택 1)

Option 1 **43인치 모니터 + 거치대**

Option 2 **확장형 + 써지컬 테이블**

Option 3 **상품 30만원 제공**

*추가 옵션 사재품 일정 양에 한하여 먼저 부탁드립니다

01 사전 판매 기간

02 사전 판매 금액

03 사전 판매 혜택

Special

Promotion 1

1

임플란트 동시 구매 시

Mount 310만원 → **280만원**

Cart 340만원 → **310만원**

2

체어 단품 구매 시

Mount 500만원 → **470만원**

Cart 530만원 → **500만원**

Special

Promotion 2

1

기본 제공

Warranty 연장 2년 → **5년**

쿠션 Set 증정



2

추가 제공 (3개 중 택1)

- 1) 43인치 모니터 + 거치대
- 2) 확장 + 써지컬 테이블
- 3) 상품 30만원 (N30 기준)



* 알체어 기준 (핸드피스, 모니터, 스케일러 제외 된 가격)

<단위 : 천원>

| 구분 | 체어 대수 | 판매가 |
|------|-------|-------|
| M5-M | 1~2대 | 4,700 |
| | 3대 이상 | 4,500 |

- M5-M 기준
- **M5-C**는 해당 PKG에서 **+30만원**
- 핸드피스 및 스케일러 필요 시 별도 가격 추가

제품 조건

M5_M 알체어

계산서 발행 기준
(체어 최대 시)

<단위 : 수량 (개) / 금액(만원)>

| 구분 | PKG CODE | 계약금액 | 제공 할증 | 제공금액 |
|--------------|------------|--------|-------|--------|
| IS-III 조건 | IPM5M-5 | 500 | 250% | 1,750 |
| | IPM5M-10 | 1,000 | 320% | 4,200 |
| | IPM5M-20 | 2,000 | 340% | 8,800 |
| | IPM5M-30 | 3,000 | 370% | 14,100 |
| | IPM5M-50 | 5,000 | 420% | 26,000 |
| | IPM5M-100 | 10,000 | 470% | 57,000 |
| IS-II 조건 | IPLM5M-5 | 500 | 230% | 1,650 |
| | IPLM5M-10 | 1,000 | 300% | 4,000 |
| | IPLM5M-20 | 2,000 | 320% | 8,400 |
| | IPLM5M-30 | 3,000 | 350% | 13,500 |
| | IPLM5M-50 | 5,000 | 400% | 25,000 |
| | IPLM5M-100 | 10,000 | 450% | 55,000 |

| 판매 금액 | 가능수량 | 총계약금액 |
|-------|------|--------|
| 280 | 1 | 780 |
| 280 | 1 | 1,280 |
| 280 | 2 | 2,560 |
| 280 | 3 | 3,840 |
| 280 | 5 | 6,400 |
| 280 | 10 | 12,800 |
| 280 | 1 | 780 |
| 280 | 1 | 1,280 |
| 280 | 2 | 2,560 |
| 280 | 3 | 3,840 |
| 280 | 5 | 6,400 |
| 280 | 10 | 12,800 |

| 제품 | | | 체어 금액 (대당 420만원) |
|-------|-------|--------|---------------------|
| 금액 | 조정할증율 | 제공금액 | |
| 360 | 386% | 1,750 | 420 |
| 860 | 388% | 4,200 | 420 |
| 1,720 | 412% | 8,800 | 840 |
| 2,580 | 447% | 14,100 | 1,260 |
| 4,300 | 505% | 26,000 | 2,100 |
| 8,600 | 563% | 57,000 | 4,200 |
| 360 | 358% | 1,650 | 420 |
| 860 | 365% | 4,000 | 420 |
| 1,720 | 388% | 8,400 | 840 |
| 2,580 | 423% | 13,500 | 1,260 |
| 4,300 | 481% | 25,000 | 2,100 |
| 8,600 | 540% | 55,000 | 4,200 |

12月

■ 사전 판매 기간
(12/1~1/14)

■ M5 정식 런칭
(12/16)

■ M5 설치 시작일
(1/08)

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (KDX) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 (DENTEX) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

1月


04

M3 대비 개선점

- 개선사항 (종합)
- 개선사항 (세부)

개선 요청 사항

| | |
|------------------------|------------------------|
| 카트타입 도입 요청 | 확장형테이블 도입 요청 |
| 풋페달 개선 요청 (오픈형) | 석션 튜브 품질 개선 요청 |
| 체어 등판 이동속도 개선 요청 | LED 레진 라이트 불 필요 |
| 센서타입 급수구 요청 | 타구대 크기 증대 요청 |
| 체어 반응속도 개선 요청 | 언더암 타입 도입 요청 |
| 원터치 스케일러 가능 요청 | 수관세척 수동이라 불편 |
| 3 way syringe 품질 개선 요청 | |
| 닥터테이블 개선 요청 | |
| 90% 개선 완료! | |
| | |
| 풋페달 조이스틱 재질 변경 요청 | |
| 라이트 이동 시 움직임 강도 조절 | |
| 오물통걸이 필요 | 닥터테이블과 인스트루먼트 사이 간격 요청 |
| 차트 거치대 필요 | 시트 색상 다양화 |
| 모니터 암 길이 연장 요청 | 네오 로고 스티커 재질 변경 |
| 목을 지지해주는 베개 요청 | 모니터암 없는 일자 풀대 도입 |
| 급수구 컵 개선 | 닥터테이블 사이즈 작게 요청 |

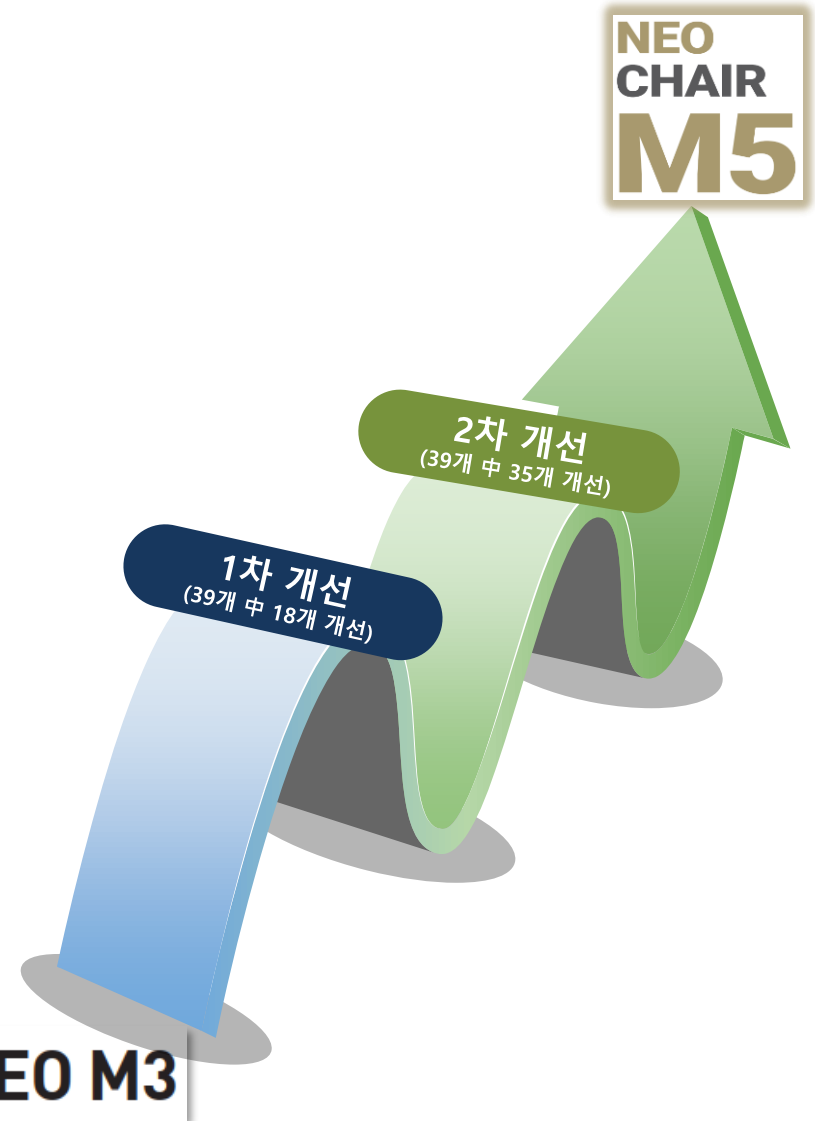

더 나은 진료를 위한

NEO Chair M3

업그레이드 안내

네오는 끝까지 책임집니다!

사용자의 편리함을 최우선으로 생각하는 NEO Chair M3의 더 나은 진료를 위하여 업그레이드를 진행합니다!

| 업그레이드 품목 |

센서타입 급수구

스케일러 원터치

오물통 걸이

반응속도 개선

포지션 오토라이트

NEO Chair M3 업그레이드 안내

* 23.4.13 목요화상교육 참고

1차 개선 List ☑ ☒



- 무게타입 급수구
- 스케일러 동작
- 오물통 걸이 X
- 체어 반응속도
- 라이트 동작
- 어시테이블 포지션버튼 기능
- 급수구 컵받침 개선



- 센서타입 급수구
- 원터치 스케일러
- 오물통걸이 제작
- 체어 즉각 반응
- 포지션 오토라이트
- 포지션버튼 추가
- 안정성있는 컵받침 사용




기타 등등 18개 개선 완료

TO BE


오픈형 풋페달 적용

AS IS

풋페달 불편함

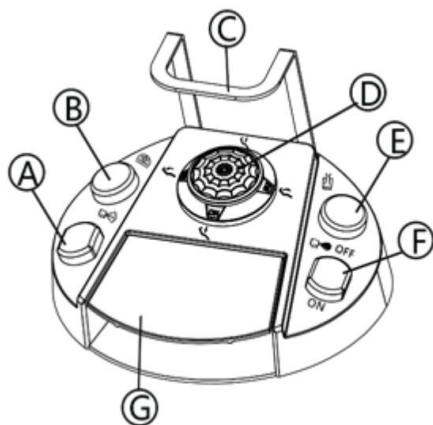

M3 사용중인 치과에서 M5 발판으로 변경 가능
(추가 금액 발생 / 추후 별도 공지)

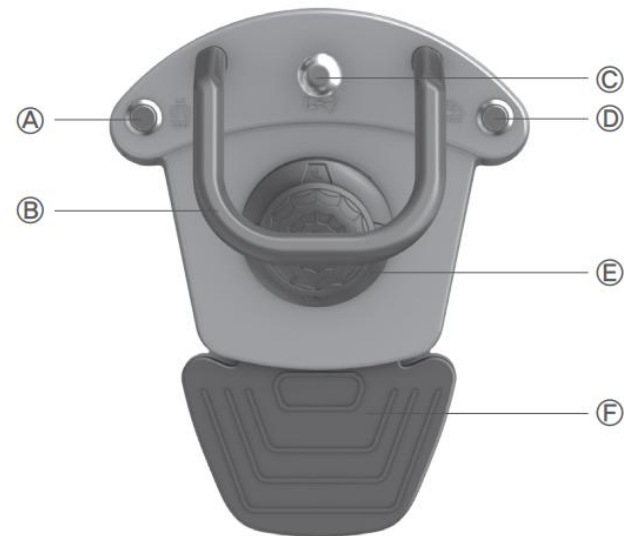


- | | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Ⓐ | 스타트 포지션 | Ⓓ | 위치 1 |
| Ⓑ | 풋 스위치 핸들 | Ⓔ | 체어 및 등받이 이동 |
| Ⓒ | 핸드피스 잔여물 제거 | Ⓕ | 주수 / 에어 사용 |

TO BE

조이스틱 재질 변경

AS IS

조이스틱 미끄러짐 발생

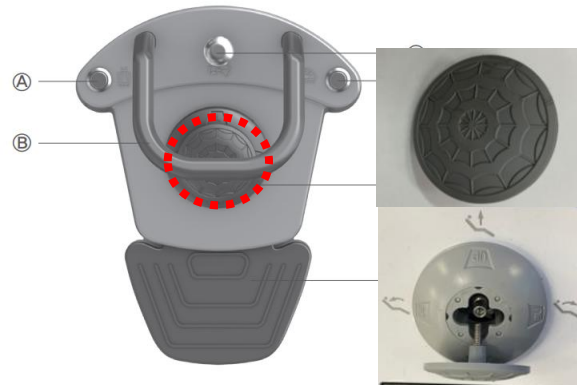

플라스틱 소재의 조이스틱이 진료 중
미끄러지는 문제와 인서트볼트가 풀리는 상황 발생



기존 플라스틱 소재에서 **TPU 소재로 변경**

* TPU : 열가소성폴리우레탄 (고무와 플라스틱이 섞여진 소재)
고무와 같이 탄성이 좋고 유연하며, 질긴 소재로 쉽게 찢어지지 않음

TO BE

AS IS

체어 등판 이동속도 느림



기존 체어 이동속도 14초로 타사 대비 느림

퀵모터 적용으로 20% 개선



퀵모터 적용으로 현재는 12초

10초 퀵모터도 계속해서 테스트 중

TO BE

AS IS

3way Syringe 품질 개선



드라이 작업 시, 수분 혼입 및 Tip 고정 불량

3way Syringe 고품질 제품 사용




M사와 동일 제품의 고품질 Syringe 사용으로,
문제점 개선 완료

TO BE

Dr.table 內 LCD 및 타이머 내장

AS IS

Dr.table 개선

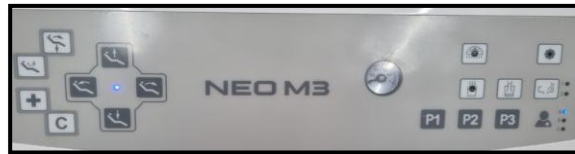

- 직관적이지만 투박한 스타일의 Dr.table
- 압력게이지 제외 및 LCD 스크린 & 타이머 내장 요청



- 강화유리 패널을 적용하여 고급스럽고 관리가 편함
- LCD 스크린 內 타이머와 압력게이지 표시

TO BE

마우스테이블 및 오물통걸이 선택 설치 가능

AS IS

오물통걸이만 설치 가능



기존 M3는 마우스테이블 없이 오물통걸이만 제작함



- 마우스테이블 & 오물통걸이 Set 제작
- 공간 여유가 없으면 오른쪽의 오물통걸이만 설치 가능

TO BE

AS IS

차트걸이 & 확장 테이블 X



기존 M3에는 차트걸이와 확장 테이블 없음

차트걸이 & 확장 테이블 제작 완료



- 차트걸이 & 확장 테이블 제작
- 차트걸이는 기본 / 확장 테이블은 옵션

TO BE


Dr.Table 개선

AS IS

Dr.table과 인스트루먼트 가까움 & 테이블 큼



- 기존 M3 Dr.table은 인스트루먼트와 가까워서 조작 버튼 누를 때 팔목에 핸드피스 bur가 걸림
- 테이블 손잡이가 양 옆에 있어서 크기가 큼

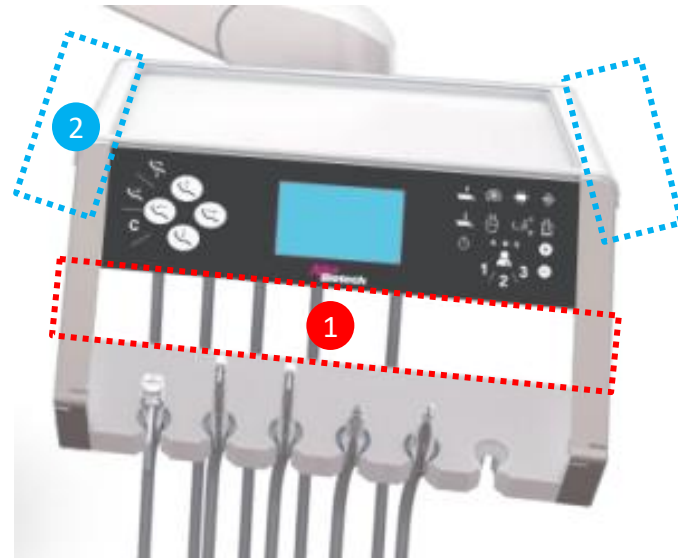


- 치료 기구와의 간섭을 최소화하여 사용자의 안전한 진료가 가능
- 손잡이가 아래로 내려가 전체적인 크기 작아짐

TO BE

AS IS

24인치 모니터 설치만 가능

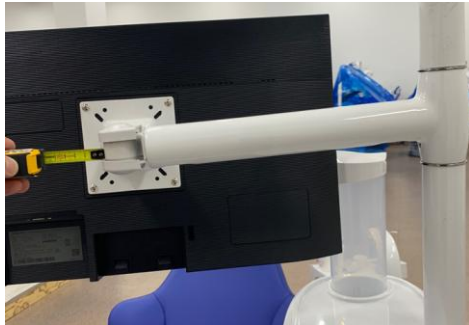

- 기존 M3 모니터 암 길이가 짧아서
24인치 모니터만 설치 가능

27인치 & 43인치 모니터 도입



- 모니터암 길이 연장으로 27인치까지 설치 가능
- 모니터 암 없는 일자 폴대 도입
- 카트타입 도입으로 43인치 모니터+스탠드 설치 가능

TO BE

AS IS

3가지의 시트 색상



브라운, 레드, 블루 색상만 판매 하였음

6가지의 시트 색상



기존 3가지 색상을 기본으로
옵션 색상 추가 (그린,스카이블루,퍼플)

TO BE

AS IS

체어 뒷면 로고 스티커 부착력 ↓



- 기존 M3는 네오임플란트 로고 사용
- 로고스티커 금속재질로 부착력이 안 좋음

스티커 재질 변경으로 부착력 ↑



- 로고 네오바이오텍으로 변경
- 재질은 시트지로 변경하여 부착력 ↑

TO BE

목 & 허리 쿠션 Set 도입

AS IS

목&허리 쿠션 판매 x



목이랑 허리를 지지해주는 쿠션 보유하지 않음




- 쿠션 Set 도입 / 옵션 품목
- 사전 판매기간에는 무상으로 제공

TO BE

AS IS

레진 라이트 2구 + 백색 라이트 4구

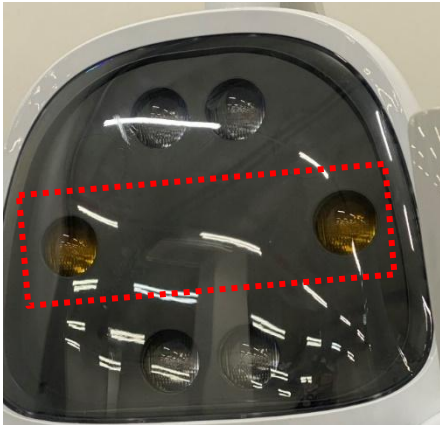

기존 라이트 : 레진 2구 + 백색 4구

레진 라이트 2구를 백색으로 변경 가능




- 레진 라이트 사용 안하는 치과는
설치 시 LED 6구 모두 백색으로 변경
- 기존 M3 체어 사용하는 치과도 요청 시 변경

TO BE

AS IS

컵 디스펜서에서 종이컵 빼기 불편함

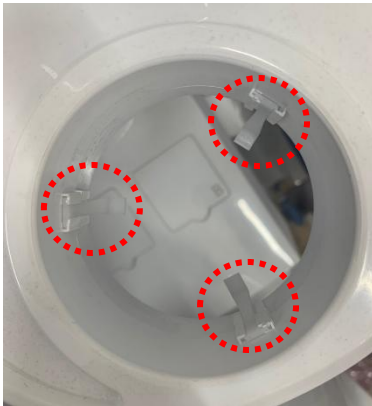

기존 삼발이 방식 사용으로
종이컵이 걸려 빼기 어려웠음

실리콘 러버 방식으로 개선



실리콘 러버 방식으로 변경 후 종이컵이 부드럽게 빠짐

05

엔지니어 인터뷰

“NEO CHAIR M5는
디자인+성능+가격을 다 잡은 1석 3조!”

적극적인 서비스 정책으로 고객의 불편을
최소화하는 AS팀을 운영 중에 있습니다.

믿고 판매해주세요.

영업사원의 힘이 되어 드리겠습니다.



체어기술팀 김태인팀장님

“NEO CHAIR는
AS 발생률이 타사 대비 적습니다!”

기계식 제어 방식으로
고장이 적고, 안정적입니다.

수관 세척시스템을 무상으로 제공하여
치과 위생관리 홍보도 도움이 됩니다.



체어기술팀 황규하프로님

“좋은 체어의 기준은 무엇일까요?”

체어를 사용하면 사용할수록
‘NEO CHAIR를 사길 잘했다’라고
생각하실 겁니다.



체어기술팀 송기동프로님

- 체어 계약 후 품의 작성 시 **주문 사양서 및 설치 환경 점검서 첨부 必**
- **품의 이후 체어기술팀과 설치 일정 조율**

NEO CHAIR M5 주문 사양서


| NEO CHAIR M5 주문 사양서 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|-----------|--------|--|-----------|------------------|
| 1. 기본정보 | | | | | | | | | |
| 병원명 | | 원장님 성함 | | 사업장명 | | 담당영업사원 | | | |
| 거래처코드 | | 병원주소 | | | | 영업면적 | | | |
| 전화번호 | | 설치요청일 | | 설치요청시간 | | | | | |
| 건물 층 수 | | Elevator 유·무 | | 비고 (미도 및 연도 후 활동 요구사항) | | | | | |
| 2. NEO CHAIR M5 설치 요청 사항 | | | | | | | | | |
| 주문 코드 | 체어수량 | 제동타입 | 핸드피스(H) | 핸드피스(L) | 스캐일러 | 색상 | | 배관형태 확인 : | 벽배관() / 바닥배관() |
| | 1 | M(Mount) | E680L | FX205 | Dmetec | Blue | | | 기타 요청사항 |
| | 1 | M(Mount) | E680L | FX205 | Dmetec | Blue | | | |
| 3. NEO CHAIR M5 핸드피스 Option 사항 | | | | | | | | | |
| 구분 | 모델 | 구성 | 수량 | 금액 | | | | | |
| High H/P | KaVo E680L | 스탠다드, LUX, 카플링 | | 650,000 | | | | | |
| | NSK M900L | 스탠다드, LUX, 카플링 | | 500,000 | | | | | |
| | AppleDental RED60-26 | 스탠다드, LUX(Kavo호환), 카플링 | | 200,000 | | | | | |
| | AppleDental RED-TUQP | 스탠다드, LUX(NSK 호환), 카플링 | | 125,000 | | | | | |
| Low H/P | NSK FX25 Set | Non-LUX, 외부주수, CA, SA, 모리 | | 500,000 | | | | | |
| | AppleDental LN-M4 | Non-LUX, 내부주수, CA, SA, 모리 | | 200,000 | | | | | |
| Scaler | Dmetec Compact S | Non-Optic | | 200,000 | | | | | |
| 4. 기계실 Option 사항 | | | | | | | | | |
| 구분 | 내용 | | | 수량 | 금액 | | | | |
| 기계실 | DBCOM 2.0(2.5마력) | | | | 1,500,000 | | | | |
| | DBCOM 3.0(3.5마력) | | | | 2,000,000 | | | | |
| | DBVACT.2(습식석션) + 소음기포함 | | | | 1,000,000 | | | | |
| 5. NEO CHAIR M5 엑세서리 Option 사항 | | | | | | | | | |
| 구분 | 내용 | | | 수량 | 금액 | | | | |
| 기본 OPTION 적용 | 모니터암 | | | | | | | | |
| | 수관 세척 시스템 | | | | | | | | |
| | 인스트루먼트 운수 시스템 | | | 1 | | | | | |
| | 차트걸이 마우스스테이블 | | | | | | | | |
| 추가 OPTION 선택 | 닥터스틀 | | | | | | | | |
| | 어시스턴트 스틀 | | | | 200,000 | | | | |
| | 헬퍼 시스템 (석션 거치대) | | | | 100,000 | | | | |
| | 확장 테이블 | | | | 100,000 | | | | |
| | 써지컬 테이블 | | | | 250,000 | | | | |
| 특이사항 | 27인치 모니터 | | | | 150,000 | | | | |
| | 43인치 모니터(거치대 포함) | | | | 300,000 | | | | |

설치 환경 점검서

| 설치 환경 점검서 | | | | |
|-------------------------------|--|------|----------------|---------------|
| 1. 거래처정보 | | | | |
| 거래처코드 | 9000008 | 거래처명 | 네오바이오텍 | 영업지점/담당자 |
| 주소 | 경기도 군포시 군포동단산로 41 | | 전화번호 | 010-3333-2875 |
| 구분 | () 개별 거래처 () 기존 거래처 | | | |
| 2. 설치환경 | | | | |
| 구분 | 점검항목 | | 점검결과 | |
| 건축사항 | 1. 설치장소 공사는 완료 되었습니까? | | () Yes () No | |
| | 2. 조명시설 및 밝기는 양호합니까? | | () Yes () No | |
| | 3. 설치 장소 주변 정리는 깨끗이 정리되어 있습니까? | | () Yes () No | |
| | 4. 체어 설치 공간(앞, 뒤, 좌, 우)은 부족함없이 확보되어 있습니까? | | () Yes () No | |
| | 5. 엘리베이터 사용 가능합니까? | | () Yes () No | |
| | 6. 계단을 이용해야 한다면 지하는 몇층에 있습니까? | | 3층 | |
| 설치사항 | 1. Comp. Suction 및 주수기 등 필수 장비는 갖추고 있습니까? | | () Yes () No | |
| | 2. 배관은 벽배관인가요? 바닥배관인가요? | | 벽배관 | |
| | 3. 배수, Suction, Water, Air Line, Suction S/W선 등은 다 갖추고 있습니까? | | () Yes () No | |
| | 4. Suction 및 배수 Pipe, Air, Water Line의 크기는 설치에 적절합니까? | | () Yes () No | |
| 전기사항 | 5. 모니터 케이블 종류를 적어주세요.(RGB, HDMI) | | RGB | |
| | 1. 전원 배전반의 상태는 양호합니까? | | () Yes () No | |
| 기타 | 2. 건물 잡지 상태는 양호합니까? | | () Yes () No | |
| | 1. Chair 작동에 문제가 될 수 있는 요소가 있습니까? | | () Yes () No | |
| | 2. Chair 이전 작업이 필요합니까? 몇대인가요? | | 1대 | |
| 3. Chair 폐기 작업이 필요합니까? 몇대인가요? | | 4대 | | |
| 3. Unit Chair | | | | |
| 구분 | 내역 | | | |
| Unit & Chair 모델 | ■ NEO CHAIR M5 | | | |
| Seat Color | ■ Blue, □ Brown, □ Red, □ Green, □ Light Blue, □ Purple | | | |
| 대수 | □ 1대, □ 2대, □ 3대, □ 4대, ■ 4대 이상(5 대) | | | |
| 비고 | | | | |
| 수 신 자 | A/S팀장, 체어 담당자 | | | |
| 장 소 자 | 상품PM팀 체어 담당자 | | | |

영업 담당자 부재 시 치과와의 커뮤니케이션 문제로 설치 담당자가 곤란한 상황이 존재
또 지속 상주 시에도 담당자의 영업 일정에 문제가 생기는 경우가 발생
=> 주요한 시간대를 지정하여 영업담당자 상주 요청

• 상주 요청 시간 (10시 설치 기준)

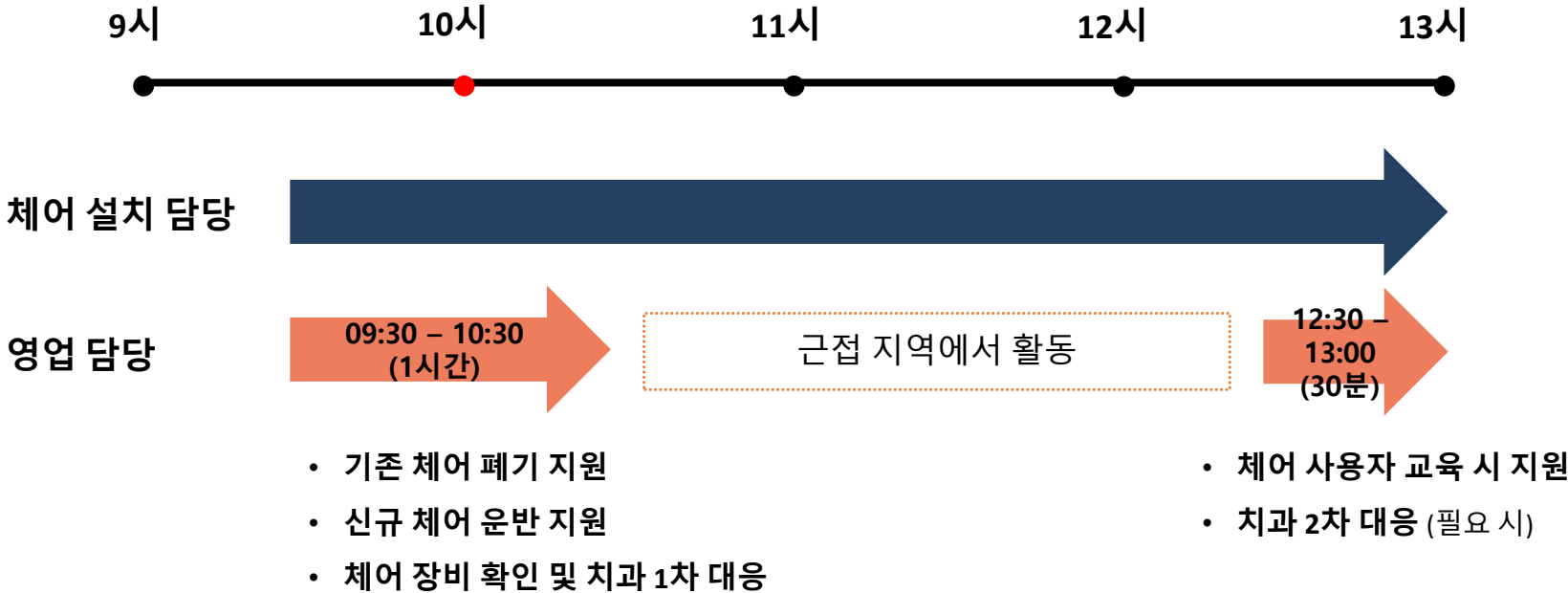

Thank You

